




如何正確使用 乾粉吸入器-Turbuhaler


你使用的是那種吸入器？

☐ 氣管擴張劑〔藍色，綠色〕 ☐ 類固醇〔棕色〕 ☐ 合併兩種(紅色)


使用步驟

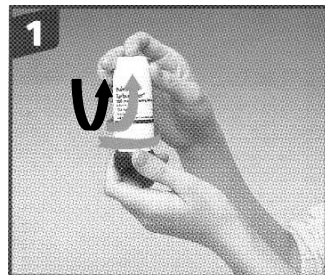


1 旋轉並移去瓶蓋

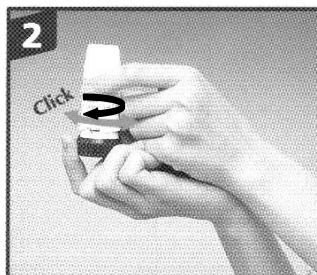


2 一手拿直吸瓶，另一手推住底盤，先右轉到底後再向左回轉底，聽到喀嚓一聲，即完一次吸劑量之充填

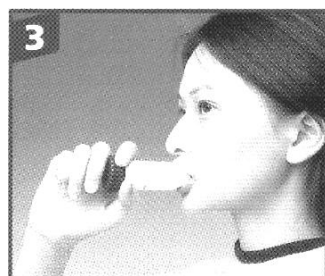


3 將吸嘴含於二唇之間

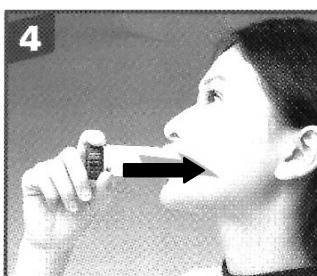

4 吸入”深深快速”地吸飽一口氣，即完成吸入一次動作

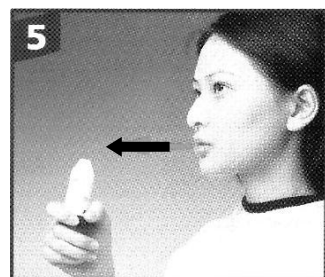

5 閉氣 5-10 秒後，輕輕且緩慢地吐氣

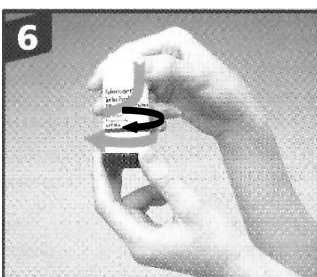

6 將瓶蓋歸位旋緊

注意事項

1. 不可對著吸嘴吹氣。在吸入後可能無法感覺到味道，無論如何，如果您已依照指示使用，您可確信此劑量已被吸入。
2. 當劑量窗口可看到紅色標示時，約尚餘 20 次劑量可用。
3. 怎麼知道吸入器已使用完畢，如右圖：
4. 若使用類固醇類藥物，使用完畢後務必漱口，以避免鵝口瘡之發生。

