

吸入型藥物衛教

乾粉吸入器(DPI)

乾粉吸入器(DPI)

要吸藥時才可以打開蓋子，如果打開蓋子，沒有吸入藥物就關上，就會損失一次藥物劑量。

1 打開




- 把蓋子往下推，直到聽見「喀嚓」聲。
- 吸入器先不要靠近嘴邊，在適當範圍內先儘量吐氣。

2 吸入



- 雙唇確實含著吸嘴，不要有空隙。
- 此時請以長而穩定的方式深吸一口氣，然後閉氣至少3-4秒。請勿由您的鼻子吸入。

3 關上

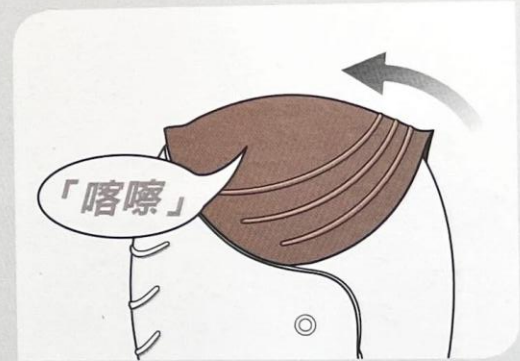

- 取出吸入器，慢慢吐氣。
- 如有需要可使用乾面紙清潔吸口。
- 將蓋子往上推，確實蓋住吸嘴。



乾粉吸入器(DPI)



平常使用

1. 開



旋轉打開瓶蓋。

2.

喀



手持瓶身，**紅色**底盤先右轉到底再左轉直到聽到「**喀**」一聲，即完成上藥。

3. 吸



完整吐氣後，將吸嘴含於兩唇間，深深用嘴巴吸一口氣。**閉氣5秒**後，即完成**1次**的用藥。

4. 漱



關上瓶蓋轉緊，並請漱口。

第一次開封請注意

喀

喀



開封後先左轉聽到一聲“喀”聲，接著往右再往左轉會聽到第二聲“喀”聲，即可開始使用。

劑量顯示器說明



當窗口出現的指標背景是**紅色**，代表劑量即將使用完畢；**當數字0在窗口中間時**，請更換吸必瀉吸入器。

劑量顯示器數字沒有移動，我有確實吸入藥品嗎？



當劑量滿載時劑量顯示器是從120開始，劑量指標**每隔10個劑量**才會有一次標示，因此顯示器數值**不會每次使用皆移動**。

即使您沒有看到劑量指標移動，只要您已經依照指示使用吸入器，便可以確信已釋出您所需的藥物劑量。

乾粉吸入器(DPI)



1

放

- 拔開帽蓋並完全打開吸嘴
- 將膠囊從鋁箔片取出，放置於吸入器中央凹槽內
- 蓋上吸嘴並聽到**喀嚓**聲



2

壓一下

- 吸入器向上，同時壓兩側橘色按鈕到底，刺破膠囊後即可放開



3

吸

- 穩定輕輕吸氣(盡可能深深吸氣)，您會聽見呼呼的聲音，接著閉氣5-10秒



4

確認

- 打開吸嘴，確認無殘留即可丟棄，若有殘留，膠囊放回後蓋上吸入器，重複“吸”的步驟

注意事項

1. 吸氣需快速且有力：**DPI**靠使用者的吸氣流速將藥粉帶入肺部，吸氣太慢會影響藥效。
2. 每次吸入前要正確準備劑量：依據吸入器類型需轉動或按壓以備好單次劑量。
3. 吸入前先吐氣但勿對著吸嘴吐：吐氣可讓肺部準備好吸藥，但若對著吸嘴吐氣會使藥粉受潮、堵塞。
4. 若含類固醇成分，使用後需漱口，預防口腔黴菌感染與聲音沙啞等副作用。